

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario




CAMA PLUS UTI
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA PLUS UTI

QUIROMED

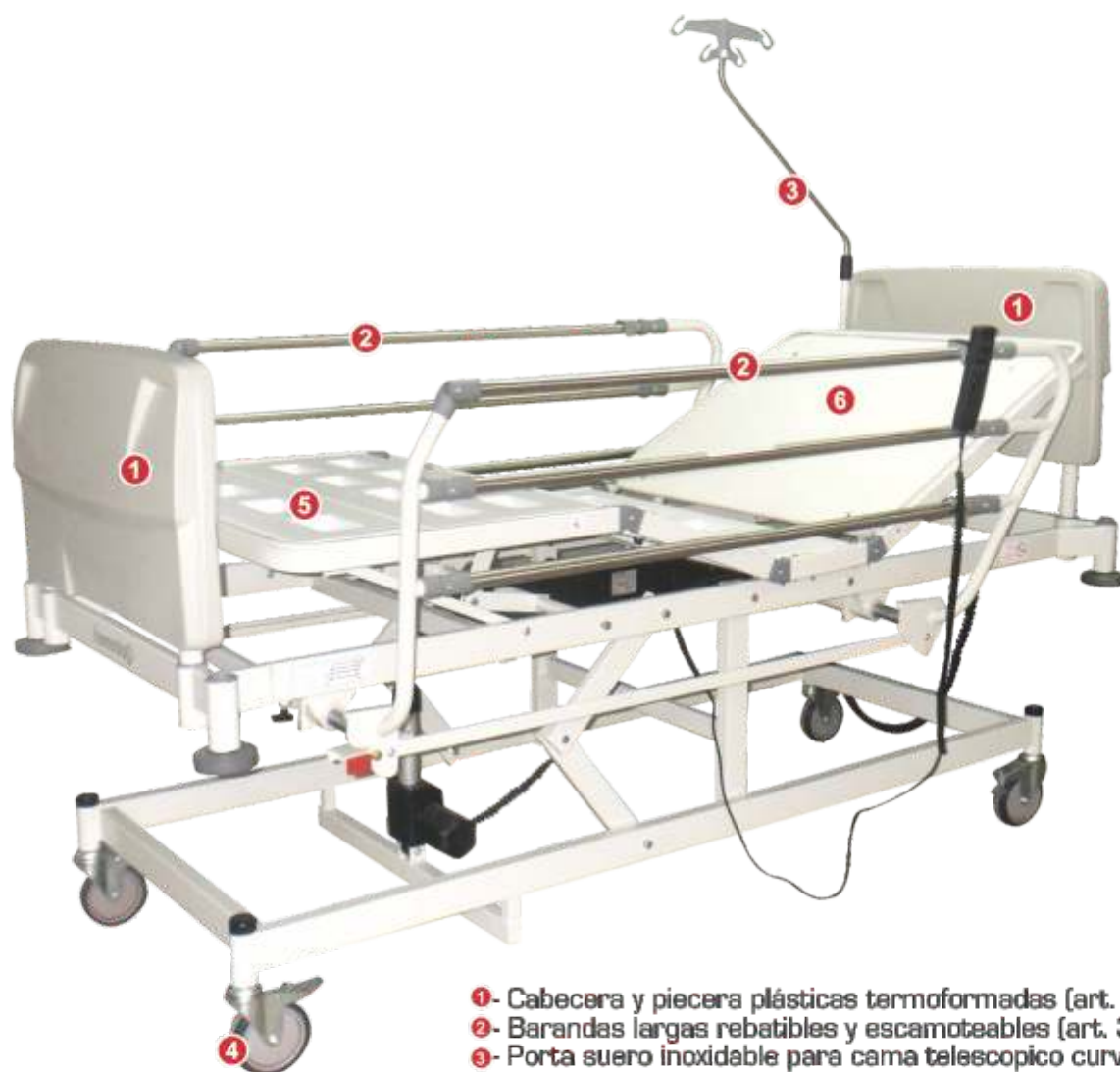

- ❶- Cabecera y piecera plásticas termoformadas (art. 200)
- ❷- Barandas largas rebatibles y escamoteables (art. 300)
- ❸- Porta suero inoxidable para cama telescópico curvado (art. 400)
- ❹- Ruedas de 125 mm con frenos independientes (art. 110)
- ❺- Lecho con paneles plásticos desmontables
- ❻- Lecho radiotransparente

Movimientos Manuales o Eléctricos



Trendelenburg 12°



Reverso de Trendelenburg 12°



Respaldar 70°



Piernas 48°


QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA PLUS UTI

QUIROMED

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

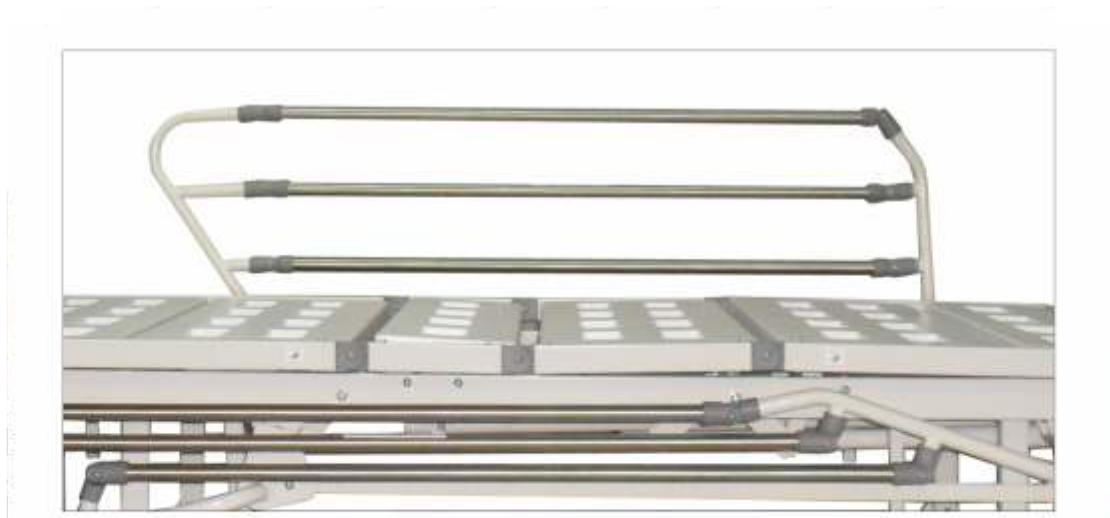


Barandas largas rebatibles y escamoteables (art. 300)

OPCIONES DE CABECERA Y PIECERA



**Cabecera y piecera plásticas
termoformadas con alma de acero**
Desmontables
(art. 200)

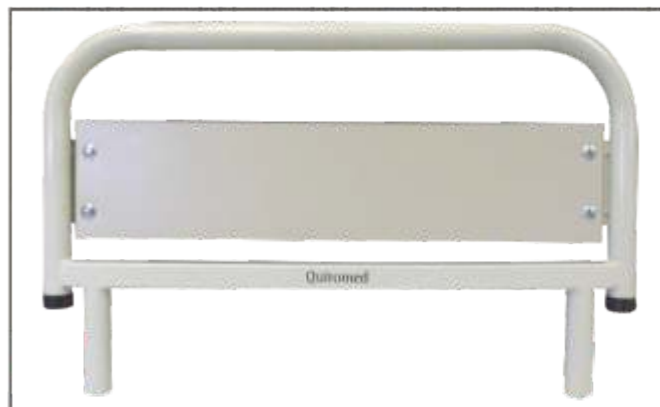

**Cabecera y piecera caño esmaltado
con placa melamínica**
(art. 240)

Opciones de color para la melamina:
Haya/Roble/Cedro/Gris/Marfil

CAMA PLUS UTI

QUIROMED

ACCESORIOS



**Conjunto de 4 ruedas x 125 mm
con freno independiente
(art. 110)**



**Trapezio esmaltado
con manillar
plástico regulable
(art. 410)**



**Soporte para
tubo de
oxígeno
(art. 436)**



**Porta suero
inoxidable para
cama telescópico
curvado
(art. 400)**



**Accionamiento
Eléctrico
(art. A-12E)**



**Opción de accionamiento manual
mediante manivelas
(art. A-12M)**

CAMA PLUS UTI

QUIROMED

PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (híbrido) electroestática, curada en horno a 200^º de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Beige

DATOS TÉCNICOS

Medidas externas	
Largo:	210 cm (82" 1/2)
Ancho:	88 cm (34")
Lecho del colchón	
Largo:	193 cm (76")
Ancho:	86 cm (34")
Altura del Lecho al piso (sin colchón):	69 cm (27")
Despegue del Piso:	18 cm (7")
Respaldar:	70 ^º
Piernas:	48 ^º
Trendelemburg:	12 ^º
Reverso de Trendelemburg:	12 ^º
Limite máximo de peso del paciente	182 kg (400 lbs.)
Peso Aproximado (según configuración)	Aprox. 90 kg (132 lbs.)
Packaging:	230 cm x 120 cm x 80 cm (largo x ancho x alto)

Los datos y fotografías presentes en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



QUIROMED[®]

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY