

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



CARRO
para EMERGENCIAS
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CARRO para EMERGENCIAS

QUIROMED



Cajones superiores con separadores interiores de medicamentos de alto impacto (art. 10-36).

- Estructura construida en chapa de acero fosfatizada con terminación esmaltado epoxi poliéster en polvo horneada a 200°
- Cuatro ruedas de 125 mm (art.111)
- Parachoques individuales (art. 10-15)
- Manijón de empuje para traslado del conjunto
- Bandeja superior de apoyo de plástico termoformado con bordes de contención
- Cuatro cajones con guía deslizable telescópica con rodamientos, separadores interiores de los dos cajones superiores y traba frontal de los cuatro cajones para uso con candado o precinto

Accesorios

- Bandeja deslizable bajo plano en acero inoxidable antimagnético (art. 10-10).
- Porta sueros (art. 10-20) Regulable
Altura Min:1330mm Altura Max:1930mm.
- Soporte aspirador (art. 10-26).
- Soporte guantes (art. 10-30).
- Plano de acero inoxidable (art. 10-01).
- Cesto plástico con traba vaiven (art. 10-29).
- Soporte lateral para tubo de oxígeno (art. 10-22).
- Tabla cardíaca (art. 10-34).
- Plano acolchado (art. 10-05).
- Bandeja 1 plano (art. 10-13).
- Bandeja 2 planos (art. 10-14).
- Lámpara halógena (art. 10-24).
- Toma corriente (art. 10-35).
- Divisiones de cajón (art. 10-36).
- Soporte p/tambores (art. 10-37).
- Soporte p/ondinas (art. 10-38).



QUIRO MED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CARRO para EMERGENCIAS

QUIROMED


PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200° de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Gris

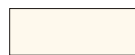

Beige

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS EXTERNAS	
ALTURA	710 MM
ANCHO	550 MM
PROFUNDIDAD	380 MM

Los datos y fotografías presentes en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY